

Токсин В тест (Toxin B Test (Toxin B-Check-1))

Тест для экспресс-определения токсина В *Clostridium difficile* в кале.

Номер по каталогу: 37001

Набор рассчитан на 20 определений

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Clostridium difficile (*C. difficile*) – анаэробная грамположительная палочка, является основным этиологическим фактором антибиотико-ассоциированной диареи и псевдомембранозного колита. Сегодня *C. difficile* – это один из наиболее распространенных патогенов и частая причина внутрибольничных инфекции в больницах, родильных домах, домах престарелых.

C. difficile был выделен из различных естественных сред, таких как почва, сено, песок, помет домашнего скота (коровы, ослы, лошади), а также фекалий собак, кошек, грызунов и человека. *C. difficile* продуцирует, как минимум, три фактора, потенциально патогенных для человека. Среди них токсины А и В считаются наиболее важными факторами патогенеза заболеваний, связанных с *C. difficile*. Токсин А представляет собой энтеротоксин, который влияет на цитоскелет клеток эпителия кишечника, вызывая их дисфункцию, тогда как токсин В – это цитотоксин с выраженным цитопатологическим эффектом в культуре клеток.

Не все штаммы *C. difficile* продуцируют токсины. Колонизация кишечника *C. difficile* характерна для 2% здорового взрослого населения и до 50% детей моложе 2 лет. Таким образом, выявление токсинов (токсина А и токсина В) в кале больных с диареей имеет большую диагностическую значимость по сравнению с выделением культур бактерий.

ПРИНЦИП МЕТОДА

TOXIN B-CHECK-1 представляет собой простой, быстрый и высокочувствительный тест для надежного определения антигена токсина В *C. difficile* в кале. Метод основан на уникальной комбинации моноклонального окрашивающего конъюгата и поликлональных, адсорбированных на твердой фазе антител, позволяющих выявлять токсин В с высокой чувствительностью и специфичностью.

После сбора пробы и растворения ее в экстрагирующем растворе несколько капель экстракта вносятся в окно для пробы (→) тестового устройства.

При прохождении исследуемой пробы через адсорбирующую зону тестового устройства конъюгат, содержащий меченые антитела, связывается с антигеном токсина В пробы (если таковой присутствует), образуя комплекс «антиген-антитело». Этот комплекс взаимодействует с поликлональными антителами в тестовой зоне устройства и образует окрашенную полосу.

При отсутствии токсина В в пробе окрашенная полоса в тестовой зоне не образуется. Вне зависимости от результата теста несвязавшийся конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны, взаимодействует с реагентом в контрольной зоне тестового устройства, образуя окрашенную полосу, что указывает на корректное проведение теста.

СОСТАВ

1. Тестовые устройства TOXIN B-CHECK-1	20 шт.
2. Одноразовые пипетки	20 шт.
3. Пластиковые пробирки, содержащие по 2,0 мл экстрагирующего раствора	20 шт.
4. Аппликаторы для проб	20 шт.
5. Инструкция по использованию	1 шт.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ

1. Тест-системы должны храниться при температуре от +4 до +30°C в оригинальной упаковке.
2. **Не замораживать!**
3. Использовать до даты, указанной на упаковке набора и индивидуальных упаковках тестовых устройств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Тест предназначен только для *in vitro* диагностики.
2. Обращайтесь с пробами так, как если бы они несли потенциальную инфекционную опасность. После окончания исследования пробирки и наконечники, контактировавшие с пробами, должны быть подвергнуты, как минимум, часовому автоклавному при температуре 121°C, или обработаны соответствующими дезинфицирующими веществами (0,5-1% -ым раствором гипохлорита натрия).
3. При проведении исследования пользуйтесь специальной лабораторной одеждой и одноразовыми перчатками.
4. Не пейте, не курите и не принимайте пищи в зоне проведения исследования.
5. При сборе образцов и проведении исследования не дотрагивайтесь руками до слизистой носа или глаз.
6. Не используйте тесты с поврежденной индивидуальной упаковкой.

7. Перед использованием теста внимательно изучите прилагаемую к набору инструкцию по применению.
8. Не пользуйтесь просроченными тестовыми устройствами.

ВЗЯТИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОБ

Предварительные замечания

Образцы кала должны быть получены как можно скорее после появления симптомов заболевания. Хранение разведенных проб в течение 3-х дней при температуре 2-8°C не оказывает влияния на результаты исследования. Если необходимо более длительное хранение, неразведенные образцы должны храниться при температуре -20°C или ниже. Избегайте повторных циклов замораживания и оттаивания.

Внимание! Контейнеры для взятия образцов не должны иметь следов консервантов, сред, детергентов или животной сыворотки, так как это может повлиять на результаты.

Процедура

1. Напишите имя пациента или идентификационный номер на пластиковой пробирке с экстрагирующим раствором.
2. Откройте пробирку и, используя аппликатор для пробы, перенесите часть исследуемого образца величиной с горошину, в пробирку. Если кал жидкий, перенесите в пробирку 200 мкл жидкости.
3. Закройте пробирку и перемешайте ее содержимое путем встряхивания до полного растворения исследуемого образца.
4. Дайте разведенной пробе постоять в течение времени, достаточного для оседания крупных частиц, либо отцентрифугируйте ее в течение 1 минуты при скорости 500-1000 об/мин.


ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Прогрейте исследуемые пробы и реагенты до комнатной температуры.
2. Выньте тестовые устройства из упаковки.
3. Откройте пластиковую пробирку с экстрагированным образцом.
4. Заполните одноразовую пипетку, входящую в состав набора, экстрактом и, держа ее вертикально, внесите 6 капель (200 мкл) в окно для пробы (→) тестового устройства.
5. Через 15 минут проведите учет результатов.

УЧЕТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ


Отрицательный результат

Результат считается отрицательным при появлении одной отчетливой окрашенной полосы в тестовом окне устройства. Токсин В отсутствует в пробе.

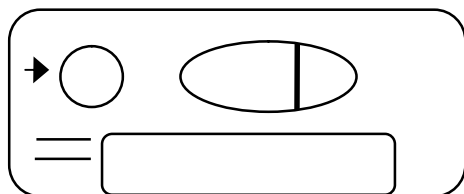

Положительный результат

Результат считается положительным при появлении двух отчетливых окрашенных полос в тестовом окне устройства. Образец содержит токсин В.

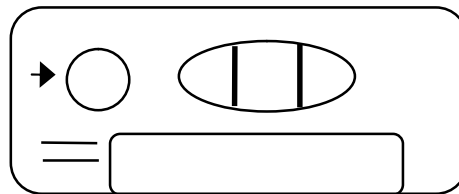

Неопределенный результат

При одновременном отсутствии отчетливых полос в тестовом и контрольном окнах устройства результаты не могут быть интерпретированы. Рекомендуется провести повторное исследование.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аналитическая чувствительность

Характеристика теста была установлена с помощью ряда разведений, приготовленных из коммерчески доступного очищенного антигена токсина В. Тест способен определить концентрацию 5 нг/мл.

Специфичность

Для выявления специфичности теста использовался коммерчески доступный очищенный токсин А. TOXIN B-CHECK-1 показывает воспроизводимый отрицательный результат вплоть до 500 нг/мл токсина А.

Воспроизводимость

Воспроизводимость в пределах опыта

Воспроизводимость в пределах опыта оценивали, выполняя одновременно 3 параллельных измерения 4-х отрицательных и положительных образцов. Отрицательные и положительные значения были правильно определены в 100% случаев.

Воспроизводимость между опытами

Воспроизводимость между опытами оценивали, выполняя анализ 4-х отрицательных и положительных образцов, с использованием одновременно 3 различных серий набора TOXIN B -CHECK-1. Отрицательные и положительные значения были правильно определены в 100% случаев.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

1. Набор TOXIN B -СНЕСК-1 предназначен только для определения токсина В *C. difficile* в образцах кала.
2. Как и в случае других диагностических тестов, полученные результаты должны подтверждаться с помощью других клинических и лабораторных данных.
3. Отрицательные результаты не исключают наличия инфекции *C. difficile*, они могут быть вызваны протеолизом токсинов в пробе при неправильном хранении. В этом случае при стойком подозрении на инфекцию следует провести дополнительное исследование новой пробы.
4. Положительные результаты теста не исключают наличия других патогенов.
5. Цвета тестовой и контрольной линий могут варьировать в зависимости от характеристик образцов кала. Например, цвет линий может быть темно-зеленым (вместо розового), если цвет кала имеет зеленоватый или темный оттенок. Этот оттенок кала может быть обусловлен терапией железодефицитной анемии фумаратом железа. В этих случаях результаты теста должны интерпретироваться как обычно, то есть положительный результат в случае двух полос и отрицательный при одной.

Производитель:

«ВЕДАЛАБ», Франция,
VEDALAB, ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006
ALENCON Cedex, France

Официальный дистрибьютор в Российской Федерации:

ООО «МИКРО-ЛАБ»

Москва, ул. Кольская, д.14, стр.6

www.micro-lab.org

8(499)399-32-36

info@micro-lab.org