

MS-4

Агароза молекулярного скрининга для улучшения разделения фрагментов ДНК длиной 500 п.н., особенно фрагментов с размером праймера. MS-4 является типом агарозы, уникальной для CONDA. При концентрации 3% агароза MS-4 дает разделение на фрагменты ДНК, аналогичные гелям, изготовленным из полиакриламида в концентрациях 8%. Хотя MS-4 допустимо осторожно растворять в микроволновой печи, гели лучше всего готовить в автоклаве.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличное разделение фрагментов ДНК меньше 500 п.н., особенно фрагментов с меньшим размером праймера.
- Образует очень чистый, прозрачный гель, в том числе при концентрациях 5% и выше.
- Возможная эффективная механическая обработка при любых концентрациях. Вероятность разрушения или растрескивания геля при работе с ним значительно минимизирована.


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

- Разделение ДНК: полосы выглядят резкими и точно разделенными.
- Активность ДНК/РНК: не зафиксирована
- Фон геля: очень низкий после Et.Br. окрашивания
- Связывание ДНК: очень низкое

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	MS-4	3%	5%
Влажность	≤7%		
Зольность	≤0.3%		
ЕЕО	≤0.12%		
Сульфаты	≤0.11%		
Прозрачность (NTU)		≤6	
Прочность геля (г/см ²)		≥500	≥1000
Температура гелеобразования (°C)		≤31	
Температура плавления (°C)		≤76	

*ЕЕО - Электроэндоосмос

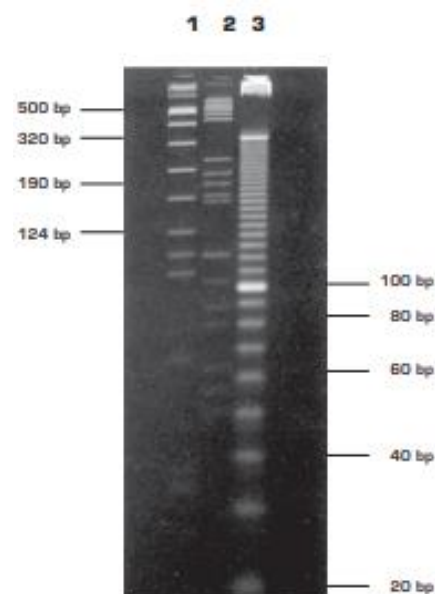

MS-4 4% агарозный гель в 0,5xTBE буфере.

Маркеры:

- дорожка 1 – маркер молекулярного веса VII (Roche)
- дорожка 2 – маркер молекулярного веса V (Roche)
- дорожка 3 – 10 пн

Условия электрофореза: подводный гель, 2,5 часа, 4,5 V / см в 0.5xTAE буфере.