

STANDARD Q

COVID-19 IgM/IgG Duo

STANDARD™ Q COVID-19 IgM/IgG Duo Test

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ТЕСТ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Тестовое устройство
(индивидуально в
фольге с осушителем)



Флакон
буферного
раствора



Капиллярная
трубка
(10 мкл)



инструкции
по применению

ПОДГОТОВКА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБА ТЕСТА STANDARD Q COVID-19 IgM и IgG ОДНОВРЕМЕННО

- Внимательно прочитайте инструкцию по применению STANDARD Q COVID-19 IgM и IgG



- Проверьте срок годности на обратной стороне упаковки. Не используйте тестовое устройство, если срок годности истек.




- Откройте пакеты STANDARD Q COVID-19 IgM и IgG и проверьте тестовое устройство и осушитель в каждой упаковке.



<Пакет из фольги>



<Тестовое устройство>

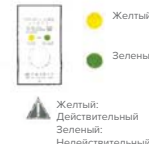


<Осушитель>

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ — ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОТЕСТИРУЙТЕ ОБА ПРЕПАРАТА STANDARD Q COVID-19 IgM и IgG ОДНОВРЕМЕННО


Процедуры тестирования для COVID-19 IgM и IgG одинаковы.

Использование капиллярной цельной крови


- Сбор образцов.** Используя капиллярную трубку, соберите 10 мкл цельной капиллярной крови до черной линии капиллярной трубки.

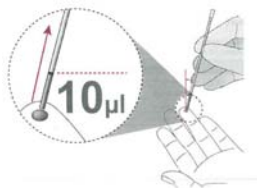


- Добавление образца.** Добавьте собранную капиллярную цельную кровь в выемку для образцов тестового устройства.

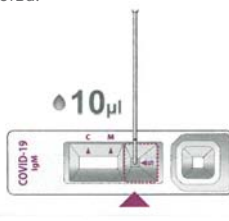

- Добавление буферного раствора.** Добавьте 3 капли (90 мкл) буферного раствора вертикально в выемку для буферного раствора тестового устройства.

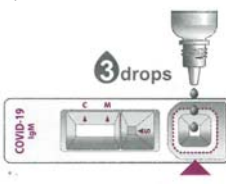


- Время проявления.** Проверьте результаты теста через 10-15 минут. ВНИМАНИЕ. Не проверяйте результаты теста после 15 минут. Это может дать ложные результаты.

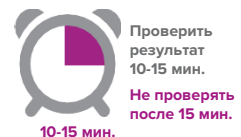


Проверить результат 10-15 мин.
Не проверять после 15 мин.
ВНИМАНИЕ! Не проверяйте результаты теста после 15 мин. Результат может быть ошибочным

Использование сыворотки / плазмы / венозной цельной крови

- Сбор образцов.** Используя микропипетку, соберите 10 мкл сыворотки, плазмы или венозной цельной крови с помощью микропипетки.

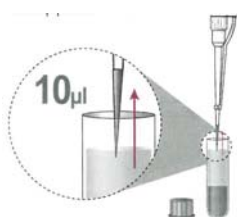


- Добавление образца.** Добавьте собранную сыворотку, плазму или венозную цельную кровь в выемку для образцов тестового устройства.

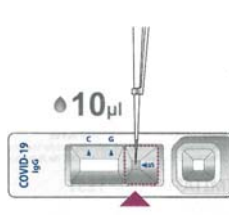

- Сброс буфера.** Добавьте 3 капли (90 мкл) буферного раствора вертикально в выемку тестового устройства.



- Время проявления.** Проверьте результаты теста через 10-15 минут. ВНИМАНИЕ. Не проверяйте результаты теста после 15 минут. Это может дать ложные результаты.

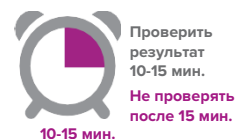

Проверить результат 10-15 мин.
Не проверять после 15 мин.
ВНИМАНИЕ! Не проверяйте результаты теста после 15 мин. Результат может быть ошибочным

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ



Используйте новое тестовое устройство для повторной проверки

- Цветная полоса появится в верхней части окна результатов, чтобы показать, что тестовое устройство работает правильно. Эта полоса является контрольной линией (C).
- Цветная полоса появится в нижней части окна результатов. Эти полосы являются тестовой линией IgM / IgG (M, G).
- Даже если контрольная линия слаба или тестовая линия не является однородной, тест должен считаться выполненным должным образом, и результат теста должен интерпретироваться как положительный результат.
- * STANDARD Q COVID-19 Test IgM и IgG Duo может давать перекрестную реакцию с антителом против SARS-CoV-1
- * Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания для диагностики или исключения инфекции SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции
- * Положительные результаты следует рассматривать в сочетании с историей болезни, результатами ОТ-ПЦР и другими доступными данными.



Изготовлено **DS BIOSENSOR**

Главный офис: C-4 и 5, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Производственная площадка: 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ








Fulfill the requirements of
Directive 98/79/EC on in vitro
diagnostic medical devices



Manufacturer



Date of manufacture



Indicate that you should
keep the product dry



Keep away
from sunlight



Do not use if
is damaged