

MS-8

Агароза для молекулярного скрининга, улучшающая разделение небольших фрагментов ДНК и продуктов ПЦР. Конда создала Агарозу MS-8 для применений, требующих эффективного разделения небольших фрагментов ДНК и продуктов ПЦР.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокий уровень разделения коротких фрагментов ПЦР и ДНК
- Улучшенная прозрачность геля, улучшенная наглядность
- Лучшая обработка, чем у конкурирующих продуктов благодаря более сильной структуре и более высокой прочности геля
- Вероятность разрушения или растрескивания гелей при обращении с ними значительно снижается даже при более низких концентрациях агарозы
- Высокая прочность геля позволяет использовать в блоттинге


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

- Разделение ДНК: полосы выглядят резкими и точно разделенными.
- Активность ДНК/РНК: не зафиксирована
- Фон геля: очень низкий после Et.Br. окрашивания
- Связывание ДНК: очень низкое

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	MS-8	1.5%	3%
Влажность	≤7%		
Зольность	≤0.35%		
ЕЕО	≤0.12%		
Сульфаты	≤0.11%		
Прозрачность (NTU)		≤5	
Прочность геля (г/см ²)		≥600	≥1500
Температура гелеобразования (°C)			≤35.5
Температура плавления (°C)			≤80

*ЕЕО - Электроэндоосмос

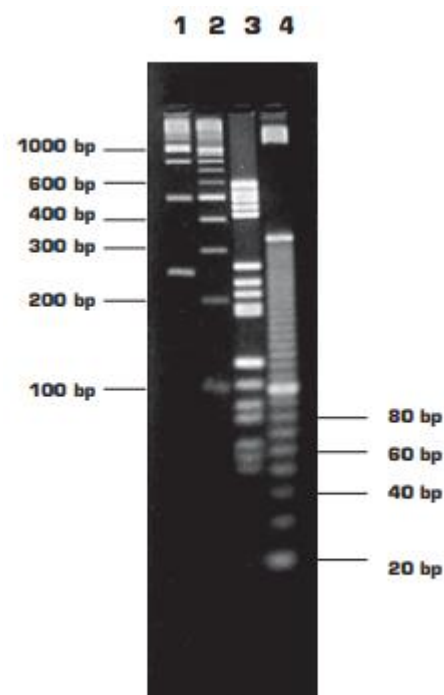

Агароза MS-8, гель, 3% концентрация в 1xTAE – буферном растворе.
 Маркеры:

- дорожка 1 – 250 пн
- дорожка 2 – 100 пн
- дорожка 3 – маркер молекулярной массы V (Roche).
- дорожка 4 – 10 пн

Условия электрофореза: подводный гель, 2 часа, 4,5 V / см в 1xTAE буфере.